



UNSERE MISSION: FÜR JEDE WUNDE EINE INNOVATIVE LÖSUNG.

Memocard 2026

Hydroaktive Wundversorgung und
innovative Kompressionstherapie

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

WUNDTHERAPIE AUF EINEN BLICK

Wundreinigung / Infektionskontrolle Seite 4

UrgoClean
Border

UrgoClean
Komresse

UrgoClean
Tamponade

Infektion Seite 7

UrgoClean Ag

UrgoTul Ag
Lite Border

UrgoTul Ag/Silver

Exsudatmanagement Seite 10

Starke Exsudation

UrgoSuperSuperabsorber

Mäßige Exsudation

UrgoSuperabsorber

Chronische Wunden Seite 12

UrgoStart
Tül

UrgoStart plus
Komresse

UrgoStart plus
Absorb

UrgoStart plus
Border

Akute Wunden Seite 16

UrgoTul Flex
NEU!

UrgoTul

UrgoTul Foam

UrgoTul
Lite Border

UrgoTul Foam
Border

Kompressionstherapie Seite 21

UrgoK1

UrgoK2

UrgoK2
Lite

UrgoK2
Latex free

UrgoK2
Lite
Latex free

Alle unsere Wundauflagen und Kompressionssysteme sind weiterhin für die patientenbezogene Verordnung erstattungsfähig.

Aktuelle Informationen rund um das Thema Erstattung finden Sie hier: www.urgo.de/erstattung

Legende



Schwach exsudierende Wunde



Kombinierbar mit anderem Verband



Kann einfach per Hand durchtrennt werden



TLC-Wundheilungsmatrix®



Mäßig exsudierende Wunde



Kombinierbar mit Kompressionstherapie



Zum Tamponieren geeignet



TLC-NOSF Wundheilungsmatrix®



Stark exsudierende Wunde



Wasserfest



Knöchelumfang 18 – 25 cm



TLC-Ag Wundheilungsmatrix®



Schwach bis stark exsudierende Wunde



Zuschneidbar



Knöchelumfang 25 – 32 cm



Bis zu 3x waschbar




Kontrolle schwacher Blutungen



Nicht zuschneidbar



Druckindikatoren

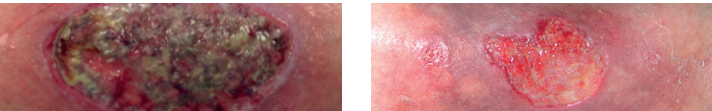

UrgoClean
Border



Hochabsorbierende Wundauflage aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern und TLC-Wundheilungsmatrix*

- Geeignet für exsudierende Wunden mit Fibrin und/oder Granulationsgewebe
- Unterstützt die Kontrolle lokaler Wundinfektionen¹
- Unterstützt die kontinuierliche Wundreinigung durch Absorption und Einschluss von Bakterien², Wundbelägen (z. B. Fibrin) sowie nekrotischen Geweberückständen mittels polyabsorbierender Fasern³.
- Reduktion der Bakterienlast und signifikante Verringerung von Biofilm⁴⁻⁶
- Vertikale Absorption des Exsudats und Rückhaltekapazität^{7,8}
- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus durch Gelbildung
- Erleichterte Kontrolle von schwachen Blutungen
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Verbesserte Wundheilung durch die TLC-Wundheilungsmatrix®
- Anwendungsfertig, einfach anzulegen und repositionierbar

Tragedauer während der Reinigungsphase 1-2 Tage, danach je nach Wundexsudat und klinischer Entwicklung der Wunde (maximale Tragedauer 7 Tage).

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoClean Border	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	10	605702	20 385 203
	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	20	605703	20 385 226
	10x10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	10	604155	19 538 446
	10x10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	20	604156	19 538 423
	10x10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	30	604796	19 749 893
	15x15 cm (Kompr. ca. 9,6 x 9,8 cm)	10	604157	19 538 400
	15x15 cm (Kompr. ca. 9,6 x 9,8 cm)	20	604158	19 538 417
	15x20 cm (Kompr. ca. 9,7 x 14,7 cm)	10	604159	19 538 452



UrgoClean
Komprese



Absorbierende Wundauflage aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern mit TLC-Wundheilungsmatrix*

- Geeignet für exsudierende Wunden mit Fibrin und/oder Granulationsgewebe
- Unterstützt die Kontrolle lokaler Wundinfektionen¹
- Unterstützt die kontinuierliche Wundreinigung durch Absorption und Einschluss von Bakterien², Wundbelägen (z. B. Fibrin) sowie nekrotischen Geweberückständen mittels polyabsorbierender Fasern³.
- Reduktion der Bakterienlast und signifikante Verringerung von Biofilm⁴⁻⁶
- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus durch Gelbildung
- Erleichterte Kontrolle von schwachen Blutungen
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Ablösen der Wundauflage in einem Stück dank der Zugfestigkeit der polyabsorbierenden Fasern^{3,9}
- Verbesserte Wundheilung durch die TLC-Wundheilungsmatrix® in der UrgoClean Komprese

Tragedauer während der Reinigungsphase 1-2 Tage, danach je nach Wundexsudat und klinischer Entwicklung der Wunde (maximale Tragedauer 7 Tage).

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoClean Komprese	6x6 cm	10	603405	08 456 260
	6x10 cm	16	604594	19 461 293
	10x12 cm	10	603365	08 456 277
	10x12 cm	20	603269	08 456 283
	12x13 cm	16	604595	19 461 287
	15x15 cm	10	604390	19 461 264
	15x20 cm	10	603432	08 456 308



UrgoClean
Tamponade




Absorbierende Tamponade aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern mit sterilem Applikator


- Geeignet für exsudierende Wunden mit Fibrin und/oder Granulationsgewebe
- Unterstützt die Kontrolle lokaler Wundinfektionen¹
- Unterstützt die kontinuierliche Wundreinigung durch Absorption und Einschluss von Bakterien², Wundbelägen (z. B. Fibrin) sowie nekrotischen Geweberückständen mittels polyabsorbierender Fasern³.
- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus durch Gelbildung
- Erleichterte Kontrolle von schwachen Blutungen
- Reduktion der Bakterienlast und signifikante Verringerung von Biofilm⁴⁻⁶
- Atraumatischer und schmerzarmen Verbandwechsel
- Ablösen der Wundauflage in einem Stück dank der Zugfestigkeit der polyabsorbierenden Fasern^{3,9}

Tragedauer während der Reinigungsphase 1–2 Tage, danach je nach Wundexsudat und klinischer Entwicklung der Wunde (maximale Tragedauer 4 Tagen).

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoClean Tamponade	5 x 40 cm	5	603218	08 456 254
	2,5 x 40 cm	5	603214	09 763 320

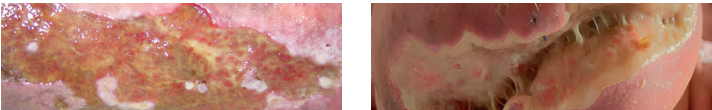

UrgoClean Ag

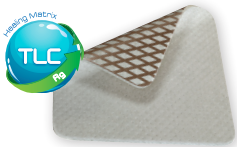


Antimikrobielle, absorbierende Wundauflage aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix®


- Starke und anhaltende antimikrobielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum, u.a. MRSA und P. aeruginosa¹⁰
- Unterstützt die kontinuierliche Wundreinigung durch Absorption und Einschluss von Bakterien, Wundbelägen (z. B. Fibrin) sowie nekrotischen Geweberückständen mittels polyabsorbierender Fasern^{3,10}.
- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus durch Gelbildung
- Erleichterte Kontrolle von schwachen Blutungen
- Reduktion des Biofilms um >99,99% innerhalb von 24 h bei MRSA und P. aeruginosa^{11,12}
- Atraumatischer und schmerzarmen Verbandwechsel

Tragedauer 1–2 Tage während der Reinigungsphase, danach bis zu 7 Tage je nach Exsudatvolumen und klinischer Entwicklung der Wunde. Nicht anzuwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber. Weitere Kontraindikationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoClean Ag	6 x 6 cm	10	754248	11 370 007
	10 x 12 cm	10	754261	11 370 013
	10 x 12 cm	20	754262	11 370 036
	15 x 15 cm	5	754268	11 370 042
	15 x 20 cm	5	551561	11 370 059

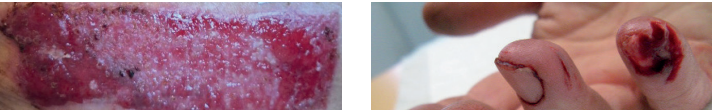

UrgoTul Ag/Silver

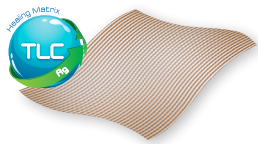

Antimikrobielle flexible Wundkontaktauflage mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix®

- Starke und anhaltende antimikrobielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum, u.a. MRSA und P. aeruginosa¹³
- Gute lokale Verträglichkeit
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzarter Verbandwechsel

Tragedauer 1 bis 3 Tage, je nach klinischer Entwicklung der Wunde.
Nicht anzuwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber.
Weitere Kontraindikationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul Ag / Silver	5 x 5 cm	10	509360	05 046 461
	5 x 5 cm	60	518515	01 686 904
	10 x 12 cm	10	507588	04 667 356
	10 x 12 cm	60	517590	06 607 909
	15 x 20 cm	5	507591	04 667 362
	15 x 20 cm	10	603495	19 054 866
	20 x 40 cm	5	551999	14 360 914



UrgoTul Ag
— Life Border




Antimikrobielle dünne, absorbierende Wundauflage mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix®

- Starke und anhaltende antimikrobielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum, u.a. MRSA und P. aeruginosa¹³
- Gute lokale Verträglichkeit
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzarter Verbandwechsel

Tragedauer 1 bis 3 Tage, je nach klinischer Entwicklung der Wunde.
Nicht anzuwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber.
Weitere Kontraindikationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul Ag Life Border	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	10	550135	09 607 117
	6,5 x 10 cm (Kompr. ca. 3,0 x 6,2 cm)	10	550136	09 607 146
	10 x 12 cm (Kompr. ca. 5,7 x 8,0 cm)	10	550137	09 607 175

STARK EXSUDIERENDE WUNDEN

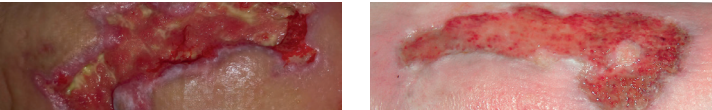

UrgoSuperSuperabsorber




Superabsorbierende Wundauflage

- Höheres Absorptionsvermögen als UrgoSuperabsorber¹⁴
- Hohe Rückhaltekapazität (Retention)¹⁴
- Saugkern aus Natriumpolyacrylat und Viskose-Polyester
- Atraumatische Wundkontaktschicht aus perforiertem Polyethylenfilm (weiß)
- Hydrophober keimabweisender Träger
- Hydrophobe Rückseite minimiert das Auslaufen von Feuchtigkeit

Verbandwechsel abhängig vom klinischen Zustand der Wunde oder vor Sättigung.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
Urgo SuperSuperabsorber	10 x 10 cm (Saugkern ca. 10 x 7 cm)	10	581020	10 823 955
	10 x 10 cm (Saugkern ca. 10 x 7 cm)	25	581021	10 823 961
	10 x 10 cm (Saugkern ca. 10 x 7 cm)	50	581022	10 823 978
	10 x 20 cm (Saugkern ca. 10 x 17 cm)	10	581023	10 823 984
	10 x 20 cm (Saugkern ca. 10 x 17 cm)	25	581024	10 823 990
	10 x 20 cm (Saugkern ca. 10 x 17 cm)	50	581025	10 824 015
	20 x 20 cm (Saugkern ca. 20 x 17 cm)	10	581026	10 824 021
	20 x 20 cm (Saugkern ca. 20 x 17 cm)	25	581027	10 824 038
	20 x 20 cm (Saugkern ca. 20 x 17 cm)	50	581028	10 824 044
	20 x 30 cm (Saugkern ca. 20 x 27 cm)	10	581029	10 824 050

MÄSSIG EXSUDIERENDE WUNDEN

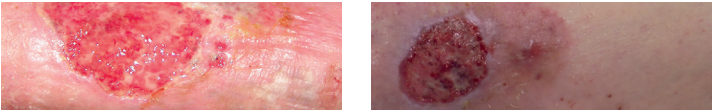

UrgoSuperabsorber




Superabsorbierende Wundauflage

- Starke Absorption
- Hohe Rückhaltekapazität (Retention)¹⁴
- Saugkern aus Natriumpolyacrylat und Viskose-Polyester
- Umhüllt von weißem Polypropylen-Vliesstoff


Verbandwechsel abhängig vom klinischen Zustand der Wunde oder vor Sättigung.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
Urgo Superabsorber	10 x 10 cm (Saugkern ca. 10 x 7 cm)	10	581001	07 110 565
	10 x 10 cm (Saugkern ca. 10 x 7 cm)	25	581002	07 110 571
	10 x 10 cm (Saugkern ca. 10 x 7 cm)	50	581003	07 110 625
	10 x 20 cm (Saugkern ca. 10 x 17 cm)	10	581004	07 110 631
	10 x 20 cm (Saugkern ca. 10 x 17 cm)	25	581005	07 110 648
	10 x 20 cm (Saugkern ca. 10 x 17 cm)	50	581006	07 110 654
	20 x 20 cm (Saugkern ca. 20 x 17 cm)	10	581007	07 110 660
	20 x 20 cm (Saugkern ca. 20 x 17 cm)	25	581008	07 110 803
	20 x 20 cm (Saugkern ca. 20 x 17 cm)	50	581009	07 110 826
	20 x 30 cm (Saugkern ca. 20 x 27 cm)	10	581010	07 110 832
	20 x 30 cm (Saugkern ca. 20 x 27 cm)	25	581011	07 110 849
	20 x 30 cm (Saugkern ca. 20 x 27 cm)	50	581012	07 110 855

CHRONISCHE WUNDEN
wie Unterschenkelulzera, Diabetische Fußulzera, Druckulzera

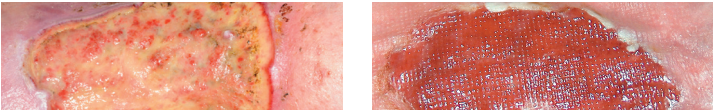

UrgoStart plus
Absorb

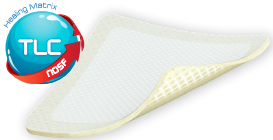


Wundheilungsverkürzende, hochabsorbierende Wundauflage aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern mit TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix*

- Anwendung in allen Wundheilungsphasen
- Reinigung der Wunde von fibrinösen Belägen durch polyabsorbierende Fasern³
- Verkürzung der Heilungsdauer durch TLC-NOSF (Sucrose-Octasulfat)¹⁵⁻¹⁷
- Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration¹⁸
- Sehr anpassungsfähig und einfach zu positionieren
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

Tragedauer 1–2 Tage während der Reinigungsphase, danach bis zu 7 Tage je nach Exsudatvolumen und klinischer Entwicklung der Wunde.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoStart Plus Absorb	6 x 6 cm	10	602982	19 342 482
	6 x 6 cm	20	602983	19 342 660
	10 x 10 cm	10	754229	19 342 654
	10 x 10 cm	20	754227	19 342 683
	10 x 12 cm	10	754231	19 342 499
	10 x 12 cm	20	754232	19 342 677
	15 x 20 cm	5	602984	19 342 507

CHRONISCHE WUNDEN
wie Unterschenkelulzera, Diabetische Fußulzera, Druckulzera

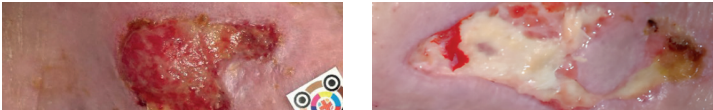

UrgoStart plus
Border




Wundheilungsverkürzende, absorbierende Wundauflage aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern mit TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix*

- Anwendung in allen Wundheilungsphasen
- Reinigung der Wunde von fibrinösen Belägen durch polyabsorbierende Fasern³
- Verkürzung der Heilungsdauer durch TLC-NOSF (Sucrose-Octasulfat)¹⁵⁻¹⁷
- Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration¹⁸
- Sehr anpassungsfähig und einfach zu positionieren
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

Tragedauer 1–2 Tage während der Reinigungsphase, danach bis zu 7 Tage je nach Exsudatvolumen und klinischer Entwicklung der Wunde.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoStart Plus Border	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	10	754217	12 898 880
	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	20	754218	12 898 897
	10 x 10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	10	754212	12 898 905
	10 x 10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	20	754285	12 898 911
	12 x 12 cm (Kompr. ca. 7,3 x 7,3 cm)	10	754288	12 898 928
	12 x 12 cm (Kompr. ca. 7,3 x 7,3 cm)	20	602882	12 898 934
	15 x 15 cm (Kompr. ca. 9,6 x 9,8 cm)	10	602879	12 898 940
	15 x 20 cm (Kompr. ca. 9,7 x 14,7 cm)	10	602868	12 898 957
UrgoStart Plus Border Sacrum	20 x 20 cm (Kompr. ca. 12,6 x 14,3 cm)	5	602890	12 898 963

CHRONISCHE WUNDEN
wie Unterschenkelulzera, Diabetische Fußulzera, Druckulzera

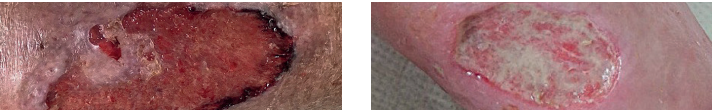

UrgoStart plus
KompreSse




Wundheilungsverkürzende, hochabsorbierende Wundauflage aus polyabsorbierenden Reinigungsfasern mit TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix*

- Anwendung in allen Heilungsphasen
- Reinigung der Wunde von fibrinösen Belägen durch polyabsorbierende Fasern
- Verkürzung der Heilungsdauer durch TLC-NOSF (Sucrose-Octasulfat)¹⁵⁻¹⁷
- Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration¹⁸
- Sehr anpassungsfähig und einfach zu positionieren
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Flexibel & zuschneidbar

Tragedauer 1–2 Tage während der Reinigungsphase, danach bis zu 7 Tage je nach Exsudatvolumen und klinischer Entwicklung der Wunde.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoStart Plus Kompre S se	6 x 6 cm	10	754180	12 596 110
	6 x 6 cm	20	754182	12 596 127
	10 x 12 cm	10	754187	12 596 156
	10 x 2 cm	20	754189	12 596 162
	15 x 15 cm	10	754195	12 596 179
	15 x 20 cm	10	754199	12 596 185

CHRONISCHE WUNDEN
wie Unterschenkelulzera, Diabetische Fußulzera, Druckulzera

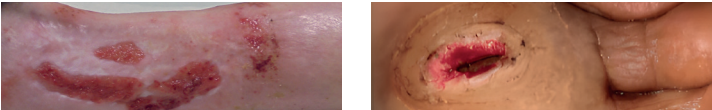

UrgoStart
TÜ



Wundheilungsverkürzende, extra flexible Wundkontaktauflage mit TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix*

- Verkürzung der Heilungsdauer durch TLC-NOSF (Sucrose-Octasulfat)¹⁷
- Extra flexibel auch zur Anwendung bei Wunden an schwierigen Lokalisationen sowie zum Tamponieren tiefer Wunden
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

Tragedauer 2-4 Tage bis zu maximal 7 Tagen, je nach klinischer Entwicklung der Wunde.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoStart T Ü	5 x 7 cm	10	754171	09 722 781
	5 x 7 cm	60	754222	09 722 812
	10 x 12 cm	10	754161	09 722 798
	10 x 12 cm	60	754223	09 722 829
	15 x 20 cm	5	754163	09 722 806


Vom G-BA bestätigt*:

UrgoStart TÜ ist die erste Wundauflage mit überlegenem therapeutischem Nutzen bei diabetischem Fußulkus.^{3,*}

* Arzneimittel-Richtlinie/Anlage V: UrgoStart TÜ – Gemeinsamer Bundesausschuss: <https://www.g-ba.de/beschluesse/7245/>


AKUTE WUNDEN

wie Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen

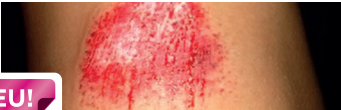

NEU!

UrgoTul Flex

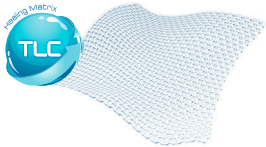

Extra flexible und anpassungsfähige Wundkontaktauflage aus gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®


- Förderung der Proliferation lokaler Fibroblasten²⁶
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Hoher Tragekomfort
- Sehr flexibel und anpassungsfähig: Passt sich an die Wundoberflächen auch an schwierigen Stellen an
- Verrutscht nicht während der Anwendung
- Klebt nicht an Handschuhen und kann auch ohne Schere getrennt werden
- Ermöglicht die Entfernung in einem Stück

Tragedauer bis zu 7 Tage (in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde). Außer bei Epidermolysis bullosa.


	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul Flex	5 x 5 cm	10	605244	20 089 373
	10 x 10 cm	10	605240	20 089 321
	15 x 22 cm	10	605247	20 089 396
	20 x 30 cm	10	605249	20 089 350
	5 x 5 cm	70	606036	20 864 754
	10 x 10 cm	70	606038	20 864 760

AKUTE WUNDEN

wie Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades

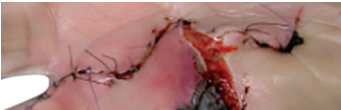

UrgoTul

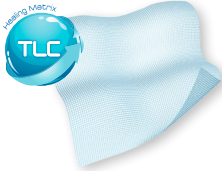

Wundkontaktauflage mit gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®


- Förderung der Proliferation lokaler Fibroblasten um + 45 %^{13,19}
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Sehr flexibel und anpassungsfähig

Tragedauer bis zu 7 Tage (in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde). Außer bei Epidermolysis bullosa.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul	5 x 5 cm	10	604353	04 114 203
	5 x 5 cm	40	604394	19 461 270
	5 x 5 cm	120	605185	01 023 138
	10 x 10 cm	10	603230	00 879 506
	10 x 10 cm	25	604392	19 461 258
	10 x 10 cm	60	521026	04 781 951
	10 x 10 cm	120	510026	03 824 121
	10 x 40 cm	10	550021	02 859 726
	15 x 20 cm	5	604307	01 303 010
	15 x 20 cm	10	604370	19 054 843
	20 x 30 cm	5	604335	09 608 973

AKUTE WUNDEN

wie Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen

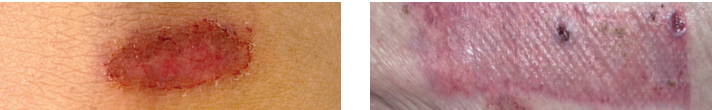

UrgoTul
—Life Border



Wundkontaktauflage mit gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®

- Förderung der Proliferation lokaler Fibroblasten um + 45 %^{13,19}
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Hoher Tragekomfort

Tragedauer bis zu 5 Tage (in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde). Außer bei Epidermolysis bullosa.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul Lite Border	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	10	605336	07 750 307
	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	50	513950	07 750 313
	6,5 x 10 cm (Kompr. ca. 3,0 x 6,2 cm)	10	602990	07 750 336
	10 x 12 cm (Kompr. ca. 5,7 x 8,0 cm)	10	602994	07 750 365
	10 x 20 cm (Kompr. ca. 5,7 x 14,7 cm)	5	602996	07 750 342
	15 x 20 cm (Kompr. ca. 8,5 x 14,7 cm)	5	503954	07 750 359
UrgoTul Duo 	10 x 5 cm	10	603587	01 916 439
	10 x 12 cm	10	603586	00 834 136
	15 x 20 cm	5	507609	00 834 142

AKUTE WUNDEN

wie Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades



UrgoTul Foam




Absorbierende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver, gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®

- Kein Verkleben mit der Wunde¹³
- Förderung der Proliferation lokaler Fibroblasten um + 45 %^{13,19}
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration
- Hoher Tragekomfort

Tragedauer bis zu 7 Tage (in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde). Außer bei Epidermolysis bullosa.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul Foam	6 x 6 cm	10	603636	10 261 724
	10 x 12 cm	10	603645	10 261 730
	10 x 12 cm	20	603647	10 261 753
	10 x 12 cm	50	604451	10 546 875
	15 x 20 cm	10	603657	10 261 776
	15 x 20 cm	5	603657	10 261 776
UrgoTul Lite 	6 x 6 cm	5	602988	10 261 799
	10 x 12 cm	5	603288	10 261 807
	10 x 12 cm	20	604450	10 261 813
	15 x 20 cm	5	603297	10 261 836
UrgoTul Foam Heel	12 x 19 cm	5	603681	10 261 782

AKUTE WUNDEN
wie Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen

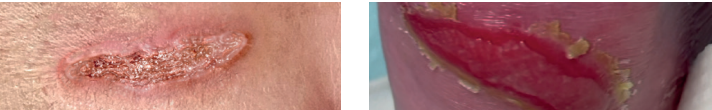



**Absorbierende Schaumstoffwundauflage
mit mikroadhäsiver, gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®**

- Kein Verkleben mit der Wunde¹³
- Förderung der Proliferation lokaler Fibroblasten um + 45 %^{13,19}
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration
- Hoher Tragekomfort

Tragedauer bis zu 7 Tage (in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde). Außer bei Epidermolysis bullosa.

	Abmessung	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoTul Foam Border	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	10	603054	10 203 106
	8 x 8 cm (Kompr. ca. 4,5 x 4,5 cm)	20	604396	10 203 112
	10 x 10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	10	603511	10 203 129
	10 x 10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	20	603055	10 203 141
	10 x 10 cm (Kompr. ca. 5,9 x 5,9 cm)	50	603894	10 409 032
	12 x 12 cm (Kompr. ca. 7,3 x 7,3 cm)	10	603525	10 203 158
	15 x 15 cm (Kompr. ca. 9,6 x 9,8 cm)	10	603555	10 203 164
	6,5 x 10 cm (Kompr. ca. 3 x 6,5 cm)	10	603441	11 096 629
	10 x 25 cm (Kompr. ca. 4,6 x 19,6 cm)	10	603543	11 096 664
	15 x 20 cm (Kompr. ca. 9,7 x 14,7 cm)	10	603561	10 203 170
UrgoTul Foam Border Sacrum	20 x 20 cm	5	603056	10 203 187

VENÖSE UNTERSCHENKELULZERA SOWIE
ÖDEME DER UNTEREN EXTREMITÄTEN

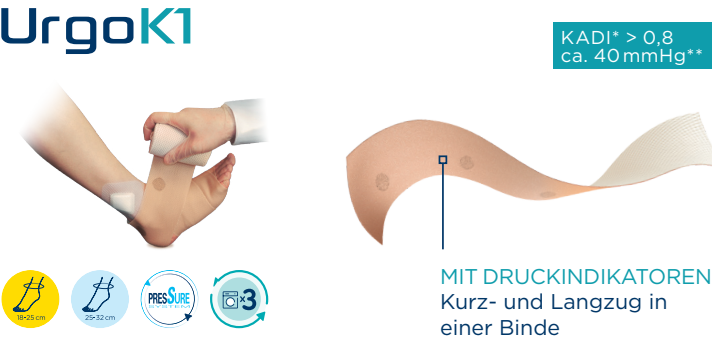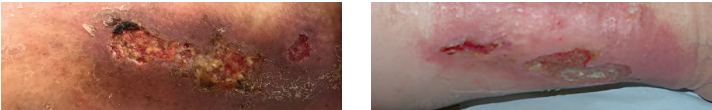

**Mehrkomponenten-Kompressionssystem
in EINER Binde für eine starke Kompression**

- Spezielle Materialbehandlung verhindert Verrutschen²⁰
- Wirksam in Ruhe und Bewegung mit dem therapeutisch notwendigen Druck²⁰
- Tragedauer bis zu 7 Tage²¹
- Mit repositionierbarem Befestigungssystem
- Nur eine Binde und einfache Wickeltechnik
- Schnelles Anlegen in unter 2 Minuten²²
- Zuverlässige und sichere Druckerreichung dank Druckindikatoren²¹
- Nur eine dünne, diskrete, atmungsaktive Binde und damit mehr Möglichkeiten z.B. bei der Schuhwahl²⁰
- Mehr Bewegungsfreiheit fördert die Lebensqualität²¹
- Verbessert den Patientenkomfort und trägt zur Patientenadhärenz bei²¹
- Bis zu 3x waschbar, mit wiederverwendbarem Befestigungssystem

	Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoK1	18 – 25 cm	10 cm	1 Binde	605779	16 901 202
	25 – 32 cm	10 cm	1 Binde	605796	16 901 225
	18 – 25 cm	10 cm	6 Binden	605795	16 901 219
	25 – 32 cm	10 cm	6 Binden	605801	16 901 231

© Fotos S. 15/16: Inga Hoffmann-Tischner, Wundmanagement Köln & Aachen

VENÖSE UNTERSCHENKELULZERA SOWIE
ÖDEME DER UNTEREN EXTREMITÄTEN




UrgoK2

UrgoK2
Latex free



KADI* > 0,8
ca. 40 mmHg**

KTECH
gepolsterte
Kurzzugbinde

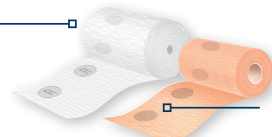

KPRESS /
KPRESS LATEX FREE
kohäsive
Langzugbinde

Zweikomponenten-Kompressionssystem für eine starke Kompression


- Einfache und sichere Handhabung dank Druckindikatoren auf beiden Binden²³
- Kontinuierlicher Kompressionsdruck ohne Verrutschen²⁴
- Therapeutisch wirksame Kompression in Ruhe und Bewegung²⁴
- Hoher Tragekomfort²⁵

	Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoK2 Set à 2 Binden	18 – 25 cm	8 cm	1 Set	552979	05 381 805
	18 – 25 cm	10 cm	1 Set	552977	05 005 120
	18 – 25 cm	12 cm	1 Set	552980	05 381 811
	25 – 32 cm	8 cm	1 Set	552981	05 381 828
	25 – 32 cm	10 cm	1 Set	552978	05 005 189
	25 – 32 cm	12 cm	1 Set	552983	05 381 834
	18 – 25 cm	8 cm	6 Sets	600722	05 381 840
	18 – 25 cm	10 cm	6 Sets	600724	01 129 115
	18 – 25 cm	12 cm	6 Sets	600726	05 381 857
	25 – 32 cm	8 cm	6 Sets	600723	05 381 863
	25 – 32 cm	10 cm	6 Sets	600725	01 129 196
	25 – 32 cm	12 cm	6 Sets	600727	05 381 886
UrgoK2 Latex Free Set à 2 Binden	18 – 25 cm	10 cm	1 Set	552934	02 421 912
	25 – 32 cm	10 cm	1 Set	552935	02 427 429

* Knöchel-Arm-Druck-Index

** Durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck in der Knöchelregion

VENÖSE UNTERSCHENKELULZERA SOWIE
ÖDEME DER UNTEREN EXTREMITÄTEN

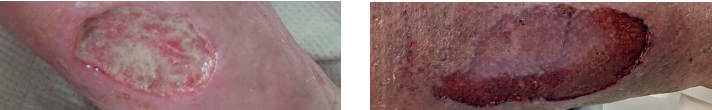


UrgoK2
Lite

UrgoK2
Lite
Latex free



KADI* 0,6 – 0,8
ca. 20 mmHg**

KTECH Lite
gepolsterte
Kurzzugbinde

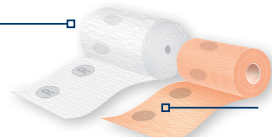

KPRESS /
KPRESS LATEX FREE
kohäsive
Langzugbinde

Zweikomponenten-Kompressionssystem für eine mäßig starke Kompression

- Einfache und sichere Handhabung dank Druckindikatoren auf beiden Binden²³
- Kontinuierlicher Kompressionsdruck ohne Verrutschen²⁴
- Therapeutisch wirksame Kompression in Ruhe und Bewegung²⁴
- Hoher Tragekomfort²⁵

	Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoK2 Lite Set à 2 Binden	18 – 25 cm	10 cm	1 Set	552984	08 464 130
	25 – 32 cm	10 cm	1 Set	552985	08 464 153
	18 – 25 cm	10 cm	6 Sets	600728	08 464 147
	25 – 32 cm	10 cm	6 Sets	600729	08 464 176
	18 – 25 cm	10 cm	1 Set	552936	02 428 096
UrgoK2 Lite Latex Free Set à 2 Binden	25 – 32 cm	10 cm	1 Set	552937	02 428 239

* Knöchel-Arm-Druck-Index

** Durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck in der Knöchelregion

- 1: Reinboldt-Jockenhöfer F. et al. Debridement – how efficient can a wound dressing be? The answer from a large prospective observational study. J Wound Care 2025; 34(4): 261-270. <https://doi.org/10.12968/jowc.2025.0046>. Keine Vergleichsstudie. Untersucht wurden insgesamt 1.558 Patienten, davon 220 mit lokaler Wundinfektion unter Einsatz von UrgoClean, von denen 47 nicht zusätzlich mit Antibiotika behandelt wurden.
- 2: Interne Daten, Urgo GmbH, Report 2023-01Ev2 (in-vitro Daten)
- 3: Meaume S. et al. Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: Results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT). J Wound Care 2014; 23(3): 105-116
- 4: Interne Daten, Urgo GmbH, Report 2011-06FV4 (in-vitro Daten)
- 5: Interne Daten, Urgo GmbH, Nexidia-report-2013-09Dv4 (in-vitro Daten)
- 6: Desroches N. et al. Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilm with adressing combining polyabsorbent fibres and a silver matrix. J Wound Care 2018; 25(10): 577-584
- 7: Interne Daten, Laboratoires URGO, RS/UR /023-306/SOL
- 8: Interne Daten, Laboratoires URGO, RS-UR-2021-577-LAP
- 9: Meaume S. et al. Cavity wounds management: a multicentre pilot study. BritishJournal of Nursing 2013 (Tissue Viability Supplement), 22(15): 520-527
- 10: Dalac S. et al. Clinical evaluation of a dressing with poly-absorbent fibres and a silvermatrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non comparative trial. J Wound Care 2016; 25(9): 531-538.
- 11: Percival S.L. Restoring balance: biofilms and wound dressings. J Wound Care 2018; 27(2): 102-113
- 12: Desroche N. et al. Evaluation of in vitro anti-biofilm activities of two dressings with poly-absorbent dressing fibres and a DACC-coated dressing. Poster EWMA 2017
- 13: White R. et al.: Supporting evidence-based practise: a clinical review of TLC healing matrix (2nd edition). MA Healthcare Ltd, London, 2015
- 14: Data on File
- 15: Meaume S. et al. A randomized, controlled, double-blind prospective trial with a Lipido-Colloid Technology Nano-OligoSaccharide Factor wound dressing in the local management of venous leg ulcers. Wound Rep Reg 2012; 20(4): 500-511
- 16: Meaume S. et al. Quality of life in patients with leg ulcers: results from CHALLENGE, a doubleblind randomised controlled trial. J Wound Care 2017; 26(7): 369-379
- 17: Edmonds M. et al. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, doubleblind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018; 6: 186-196
- 18: Sigal M.L. et al.: Clinical evaluation of a new TLC-NOSF dressing with poly-absorbent fibers for the local management of exuding leg ulcers, at the different stages of the healing process: Results from two multicentric, single-arm, prospective, open-label clinical trials. J Wound Care 2019; 28(3): 164-175
- 19: Bernard F.X. et al. Stimulation of the proliferation of human dermal fibroblasts in vitro by a lipidocolloid dressing. J Wound Care 2005; 14(5): 215-220. Durchgeführt mit UrgoTül
- 20: Benigni J.-P. et al. Static Stiffness Index of Two Multicomponent Bandage Compression Systems: Results of a Randomized Controlled Trial on Healthy Volunteers. Phlebologie 2021; DOI: 10.1055/a- 1487-4194
- 21: Senet P. et al. A new compression system for treatment of venous leg ulcers: a prospective, single-arm, clinical trial (FREEDOM). J Wound Care 2022; 31(9): 734-747
- 22: Internal Report – Laboratoires Urgo; Tests performed with 15 nurses on a patient care manikin
- 23: Hanna R. et al. A comparison of interface pressures of three compression bandagesystems. British Journal of Nursing 2008; 17 (20): S16-S24
- 24: Jünger M. et al.: Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care 2009; 18(11): 474-480
- 25: Benigni J.P. et al.: Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage systemfor venous leg ulcers. J Wound Care 2007; 16(9): 385-390
- 26: In-vitro-Daten. Internal report N° D/000-009/URGOFIT, Laboratoires Urgo, 2025.
*UrgoFit: Internationaler Markenname; UrgoTül Flex in Deutschland

TLC = Technology LipidoColloid (Verhindert ein Verkleben mit der Wunde, hält die Wunde feucht, fördert die Proliferation der lokalen Fibroblasten, unterstützt die Rekonstruktion von Dermis und Epidermis und verbessert das Ergebnis der Wundheilung)¹³

NOSF = NanoOligoSaccharid-Faktor oder Sucrose Octasulfat (eingebettet in die TLC-Wundheilungsmatrix*, reduziert den Level der in allen chronischen Wunden im Überschuss vorhandenen und heilungsstörenden Matrix-Metalloproteasen)

Ag = Silbersalz

Bitte vor Gebrauch die Gebrauchsinformation beachten.



**ICH
BILDE MICH WEITER UND
ZIEHE
ALLE REGISTER IN SACHEN
WUNDVERSORGUNG.
DURCH
URGOMASTERS BAUE ICH
MEIN WISSEN PRAXISNAH
AUS.**

Mit URGO die nächste Stufe erreichen.

www.urgo.de/veranstaltungen

Urgo Masters 
Wissensvorsprung Wundversorgung

VERORDNUNGSFÄHIGKEIT VON VERBANDMITTELN

Die Verordnungsfähigkeit von Verbandmitteln für den Sprechstundenbedarf hat den Bedürfnissen der Praxis zu entsprechen und muss zur Zahl der Behandlungsfälle und zu den erbrachten Leistungen in angemessenem Verhältnis stehen. Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist zu beachten.

Der Sprechstundenbedarf wird grundsätzlich von jeder KV spezifisch für die jeweilige Region geregelt. Wir empfehlen Ihnen daher, sich an die für die Abwicklung von Sprechstundenbedarf zuständigen Kostenträger oder die jeweilige KV zu wenden.

UNSERE ZUSCHNITTMUSTER FÜR IHRE TÄGLICHE WUND- PRAXIS.


Gerade an schwierigen Körperstellen wie Zehen, Fersen oder unter der Brust sind spezielle Zuschnittmuster von Wundauf-
lagen unverzichtbar. Sie sorgen für eine passgenaue Anpassung
an die Körperform und bilden die Grundlage für sicheren Halt,
hohen Tragekomfort und eine effektive Wundheilung.





Zehen- / Finger-
zwischenraum



Zehen- / Finger-
kuppen

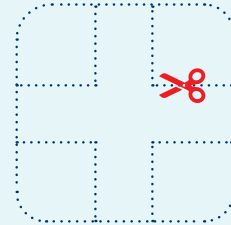



Fußaußenkante

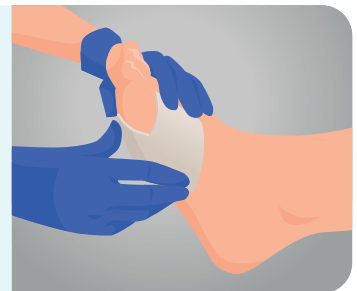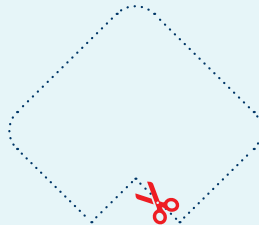


Hand





Ohr

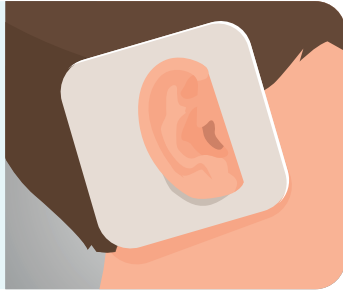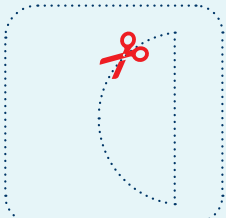



Ferse

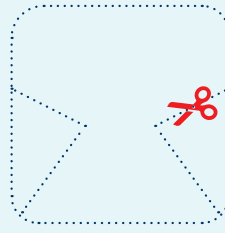


Tiefe Wunden

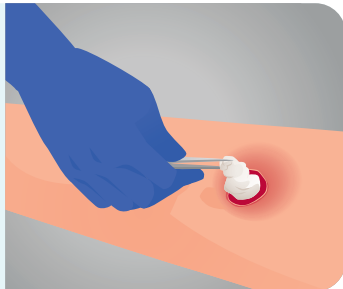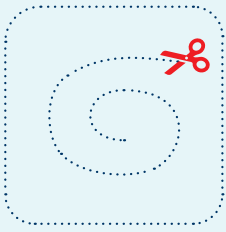



Ohrmuschelrand

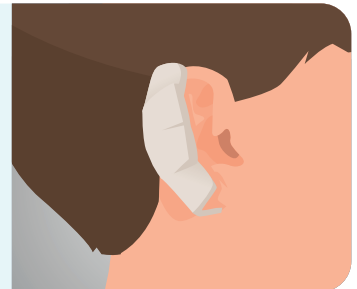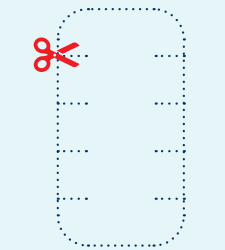

Zehen- / Finger-
zwischenraum

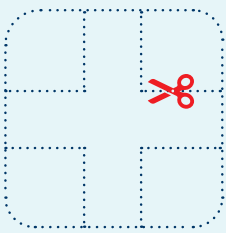

Finger- / Zehen-
zwischenräume

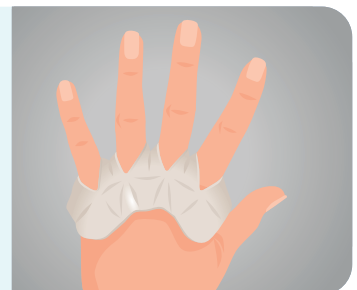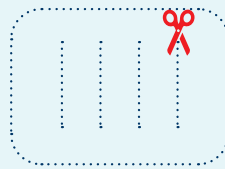

QR-Code für
Zuschnittmuster
hier scannen,
downloaden und
ausdrucken!





Weitere Tipps
zur Anwendung
finden Sie
auf unserem
YouTube Kanal.


ZUSCHNITTE FÜR URGO
PRODUKTE MIT HAFTRAND:



Verlängerung

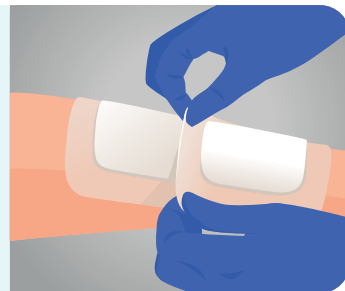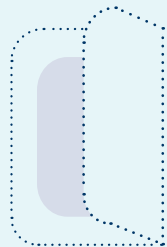



Ferse

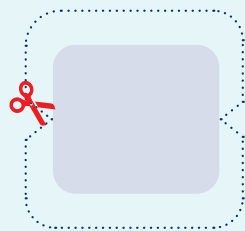

Körperfalten z.B.
Ellenbeuge oder Brust



Finger

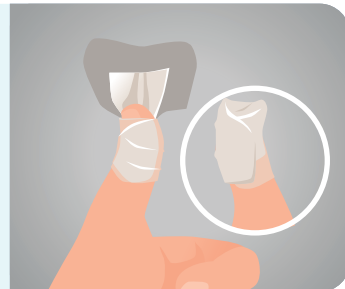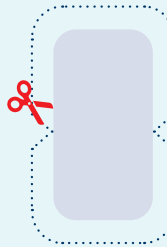



MITREDEN KÖNNEN LEICHT GEMACHT!

WundNews – der URGO-Newsletter.
Ein Muss für alle Wundexpert:innen.

Jetzt anmelden und aufschauen!



KUNDENSERVICE

Unser Kundenservice steht Ihnen für alle Fragen zu den Produkten gerne persönlich zur Verfügung:

Geschäftszeiten

Mo.-Do. 08:30 bis 16:30 Uhr
Fr. 08:30 bis 14:30 Uhr

T 06897 579-111
F 06897 579-469



URGO GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 16
D-66280 Sulzbach

info@urgo.de
www.urgo.de